

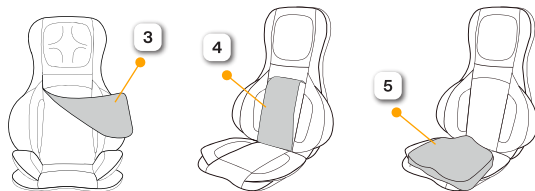


medivon.

NAVODILA ZA UPORABO

Cosy Air Pro

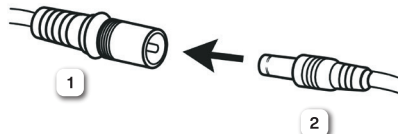

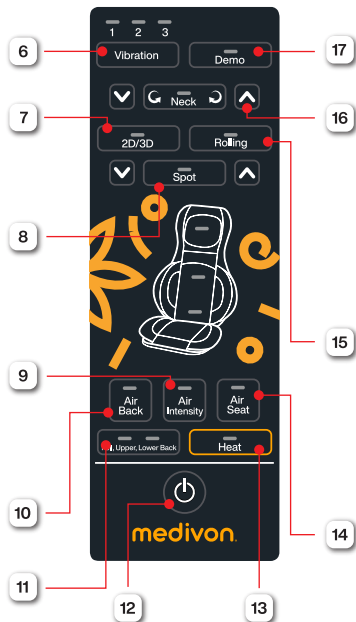

1. Konfiguracija in uporaba

- Podlogo pritrdite na stol z elastičnimi trakovi
- Mat konektor (1) povežite z napajalnim konektorjem (2)
- Domači napajalnik priključite v električno vtičnico
- Vključite napravo z daljinskim upravljalnikom (navodila kasneje)
- RC položite v torbo ob strani masažne preproge

Opomba: Odstranljiva loputa (3) ali prevleka za masažni del vratu vam omogoča prilagajanje intenzivnosti med bolj nežno in intenzivnejšo masažo. Če je masaža premočna, medse in podlogo položite odejo ali brisačo (4)

Če želite zmasirati vrat, ramena, križ, pa shiatsu masažne glave ne dosežejo teh predelov, lahko prilagodite višino masaže tako, da na sedežno površino položite blazino (5).



Da bi preprečili preobremenitev mišic, priporočamo, da ena masaža ne traja več kot 15 minut. Ne masirajte se več kot 3-krat čez dan. (v celotnem območju delovanja naprave - 15 minut)

2. Nega in čiščenje

- Izdelka ali adapterja ne pomivajte v stroju in ne potaplajte v vodo.
- Pred čiščenjem vedno izklopite napajanje in odstranite adapter iz napajanja s čistimi, suhimi rokami.
- Napravo obrišite z rahlo vlažno krpo in jo temeljito osušite.
- Naprave ne brišite s pripravki, ki vsebujejo alkohol ali močne kemikalije, kot sta razredčilo ali belilo.
- Prevleka za vrat je snemljiva in pralna.
- Ne napnite preveč elastičnih trakov na hrbtu.

- Hraniti ločeno od vročine, ognja ali neposredne sončne svetlobe.
- Ne pritiskejte premočno na napravo in masažne glave. • Uporaba neposredne sile, ki presega 49 kg, lahko poškoduje masažno napravo in razveljavi garancijo.
- Masažni aparat hranite na suhem mestu, nedostopnem otrokom.
- Izogibajte se stiku z ostrimi robovi ali ostrimi predmeti, ki bi lahko prerezali ali preluknjali material naprave.

3. Opis daljinskega upravljalnika

- (6) - pritisnite za vklop vibriranja masažnega aparata, preklaplja te lahko med 3 stopnjami intenzivnosti.
- (7) - pritisnite za spremembo načina 2D/3D masaže. V 3D opciji dodatno upošteva točno področje hrbtenice.
- (8) - pritisnite, da ohranite funkcijo shiatsu na enem območju. Pritisnite puščične gumbе, da premaknete glave shiatsu gor ali dol.
- (9) - pritisnite za nastavitev intenzivnosti zračne masaže na nizko, srednjo ali visoko stopnjo.
- (10) - pritisnite, da omogočite ali onemogočite zadnjo zračno masažo.
- (11) - pritisnite, da označite območje s shiatsu masažo.
- (12) - pritisnite za vklop ali izklop naprave.
- (13) - pritisnite za vklop ali izklop gretja. Gretja ni mogoče vklopiti, če ni vklopljena funkcija hrbtne shiatsuja.
- (14) - pritisnite, da omogočite ali onemogočite zračno masažo sedeža.
- (15) - pritisnite za vklop funkcije masaže z rolanjem. Večkratni pritisk spremeni načine.
- (16) - pritisnite za začetek shiatsu masaže na vratu. Puščice spreminjajo položaj masažnih glav v podlogi.
- (17) - hiter prikaz vseh funkcij masažne preproge

4. Varnostna navodila

- Naprave nikoli ne puščajte brez nadzora, ko je priključena na napajanje. Pred sestavljanjem ali razstavljanjem napravo izključite iz električnega omrežja.
- Naprave ne uporabljajte pod pokrovom, kjer bi lahko bila prezračevalna odprtina blokirana. Naprava se lahko pregreje.
- Ta naprava zahteva natančen nadzor odraslih, če jo uporabljajo otroci ali osebe s posebnimi potrebami.
- Ne uporabljajte z drugimi dodatki, ki jih proizvajalec ne priporoča.
- Aparata nikoli ne uporabljajte, če ima poškodovan kabel ali vtič, če ne deluje pravilno, če vam je padel na tla, je bil poškodovan ali je padel v vodo. V takih primerih se takoj obrnite na servis.
- Naprave ne prenašajte skupaj z napajalnim kablom ali je uporabljajte kot ročaj.
- Nikoli ne uporabljajte naprave z zamašenimi zračnimi odprtinami.
- V odprtine nikoli ne vstavljajte predmetov.
- Ne uporabljajte na prostem.
- Pri uporabi ne nosite nakita ali ohlapnih oblačil.
- Daljše lase morate pred uporabo speti, da ne pridejo v stik z napravo.

- Ne uporabljajte funkcije ogrevanja na mestih, kjer imate kožne težave, odprte rane, otekline ali vnetja.
- Če so vtiči ali kablji poškodovani, jih mora zamenjati servisna služba.
- V primeru okvare napravo takoj izključite iz električnega omrežja.
- Ne uporabljajte na mestih, če imate kožne nepravilnosti, odprte rane, otekline ali vnetja.
- Nepravilna ali nepravilna uporaba izključuje vso odgovornost za škodo.
- Te naprave ne uporabljajte med vožnjo ali med spanjem.
- Za varno uporabo smo napravo opremili z zaščito pred pregrevanjem.
- Naprave ne uporabljajte med nosečnostjo.
- Ne uporabljajte, če imate srčni spodbujevalnik ali se zdravite zaradi bolezni ali drugih obolenj.



Ta aparat ni namenjen uporabi s strani oseb (vključno z otroki) z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, razen če jih pri uporabi aparata nadzoruje ali jim daje navodila oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost. Otroke je treba nadzorovati, da se z aparatom ne bi igrali. Aparat se sme uporabljati samo z napajalnikom, ki je priložen aparatu. Aparat ima ogrevano površino. Osebe, ki so neobčutljive na toploto, morajo biti pri uporabi aparata previdne.