

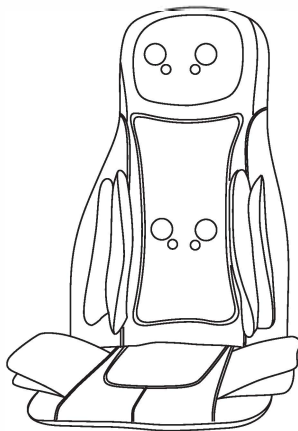


medivon.

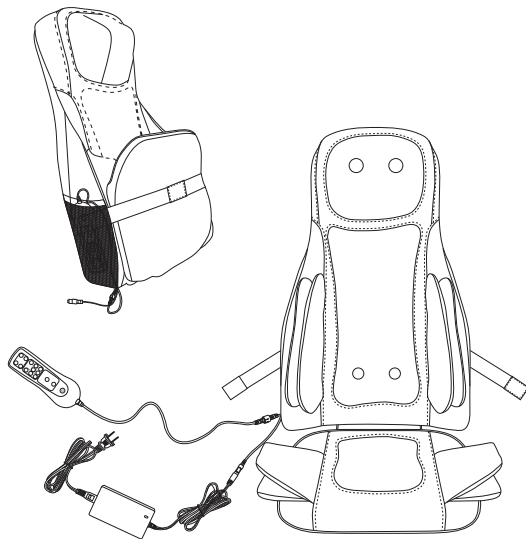

NAVODILA ZA UPORABO

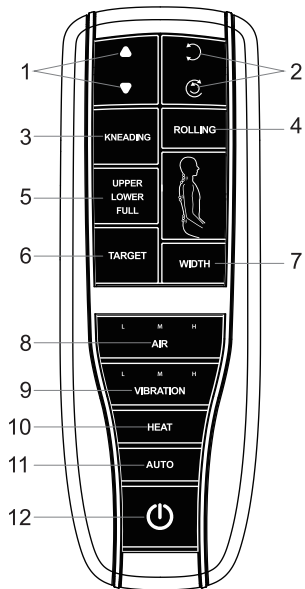

Navodila za daljinsko upravljanje masažne podloge Medivon Olympia

1. Gumba za upravljanje vratu (gor/dol) Pritisnite in držite ta gumba za ročno nastavitve višine masažnega aparata za vrat.

2. Nadzorujte smer vrtenja glav na vratnem delu. Prvi gumb ciklično spreminja smer, drugi gumb pa vklopi samodejno spreminjanje smeri masaže.

3. Gumb za gnetenje: Vklopi/izklopi masažo z gnetenjem z vrtenjem glav. Opomba: Ne deluje skupaj z gumbom za širino.

4. Gumb za valjček – Vklopi/izklopi pomirjujočo masažo z enakomernim premikanjem valjčka gor in dol. Z gumbom za širino prilagodite širino masažnega elementa.

5. Območje masaže hrbta – Celoten, zgornji ali spodnji del hrbta.

6. Gumb za fokusiranje – Ustavi in usmeri masažne glave v zeleni položaj.

7. Gumb za širino – Prilagodi delovno širino masažnih glav med masažo z valjčkom.

8. Gumb za zrak – Aktivira funkcijo stiskanja zraka okoli stegen, sedala in pasu. Na voljo so tri stopnje pritiska: nizka, srednja, visoka.

9. Gumb za vibracije – Aktivira program masaže z vibracijami sedeža. Tri stopnje intenzivnosti: nizka, srednja, visoka.

10. Gumb za ogrevanje – Vklopi/izklopi funkcijo ogrevanja v predelu vratu in hrbta.

11. Gumb za samodejni način – Samodejno zažene program masaže, ki vključuje masažo hrbta, zračno masažo, vibracije in ogrevanje.

12. Gumb za vklop – Gumb za vklop mora biti vklopljen, da vse funkcije delujejo. Če med delovanjem izklopite napajanje, se bodo valjčki vrnili v prvotni položaj.