


medivon.

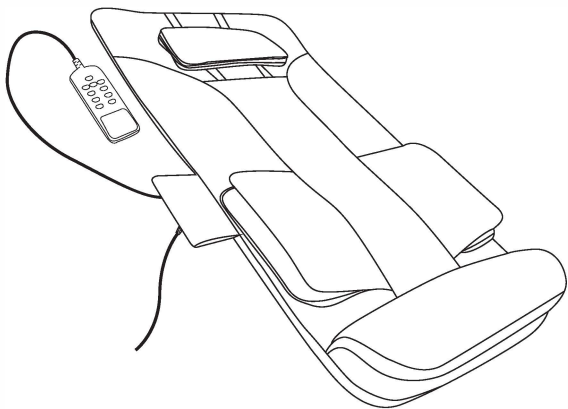

NAVODILA ZA UPORABO

Delovanje naprave

Napravo lahko uporabljate neposredno. Samo priključite napajalnik, ki je vključen v paketu, in držite gumb za vklop 2 sekundi, da preklopite v stanje pripravljenosti.

V stanju pripravljenosti pritisnite gumb na daljinskem upravljalniku, da vklopite ali izklopite ustrezen masažni način ali funkcijo masažerja. Na voljo so naslednji načini masaže:

Samodejni način, način zavijanja, način za risanje, način za sprostitvev, način za vrat, način za hrbet, način za boke.

Uporabite intenzivnost za ciklično spreminjanje s pritiskom ustreznega gumba za intenzivnost. Funkcija ogrevanja deluje na podoben način.

Čas in intenzivnost masaže prilagodite svojim željam. Naprave ne smejo uporabljati osebe s poškodbami ali ki so bile v zadnjih 3 mesecih operirane. Naprave ne uporabljajte pri visokih temperaturah in v vlažnih prostorih.

Vsekakor se izogibajte vodi. Prav tako naprave ne morejo uporabljati ljudje s hipertenzijo, hipotenzijo ali hudo možgansko kapjo. Ljudje s težavami s kožo naj se pred uporabo posvetujejo z zdravnikom.

Če med uporabo čutite bolečino ali nelagodje, takoj prenehajte z uporabo in se posvetujte z zdravnikom. V nasprotnem primeru je lahko škodljivo za vaše zdravje.

