


# lovio

## HOME

Zobna ščetka SonicProtect PRO LVTB124WH / LVTB124BK  
Zobna ščetka SonicProtect PRO LVTB124WH / LVTB124BK

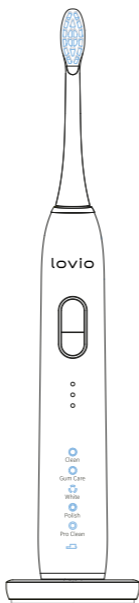

Uporabniški  
priročnik

## VSTOP

Hvala, ker ste kupili našo električno zobno ščetko. Če imate kakršna koli vprašanja ali težave s tem izdelkom, nas kontaktirajte na [kontakt@lov-io-home.com](mailto:kontakt@lov-io-home.com)

## Nasveti

Prosimo, da natančno preberete uporabniški priročnik in izdelek pravilno uporabljate na podlagi uporabniškega priročnika, da se z izdelkom bolje seznanite.

## FUNKCIJE



Naprava	Zobna ščetka
Dodatki	Nasveti x4
	Brezžični USB polnilnik
	Ščetka za čiščenje obraza
	Uporabniški priročnik
	Potovalni kovček

## SPECIFIKACIJA

Ime izdelka	SonicProtect PRO
Model	LVTB124WH / LVTB124BK
Dimenzije	240*27.8*28.3mm
Moc	2W
Napajanje polnilnika	5v
Čas polnjenja	30–36 ur
Čas uporabe	Do 180 dni
Akumulator	Litijeva baterija
USB-kabel	1 meter


## SHEMA KONSTRUKCIJE IZDELKA

- 1 - Zamenljiva glava zobne ščetke
- 2 - Ergonomsko oblikovan ročaj
- 3 - Gumb za vklop/izklop
- 4 - Gumb za nastavitev načina in frekvence
- 5 - Prikluček za brezžično polnjenje
- 6 - Podstavek za brezžično polnjenje
- 7 - Indikatorska lučka pritiska
- (zobje so trdno stisnjeni, oglasi se alarm)
- 8 - Indikator zamenjave glave zobne ščetke

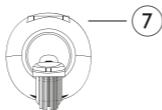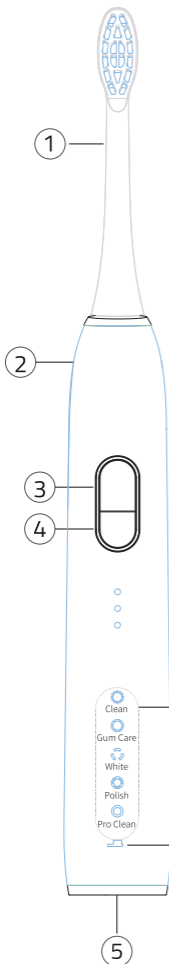

### 5 Trybów

- Clean Osnovni način čiščenja
- Gum Care Način nege dlesni
- White Način beljenja
- Polish Način poliranja
- Pro Clean Način profesionalnega čiščenja

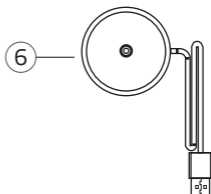

## FUNKCJE



Vstavite glavo ščetke v napravo in pustite režo za normalno vibriranje.



Navlažite glavo ščetke in nanosite majhno količino zobne paste.



Preden jo vklopite, jo vstavite v usta, da preprečite brizganje zobne paste. Nato pritisnite gumb za vklop.




Glavo ščetke namestite pod kotom 45 stopinj proti liniji dlesni.



Glavo ščetke počasi premikajte s krožnimi gibi. Ne pritiskajte premočno ali drgnite pregrobo; za čiščenje zob uporabite nežen pritisk.



Po umivanju zob si lahko sperete usta.

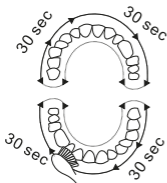

Med 2 minutama ščetkanja, ki ju priporočajo zobozdravniki, se bo časovnik po vsakih 30 sekundah na kratko ustavil, da vas opomni, da si umijete različne predele.

## FUNKCJE



▶ **2-minutni časovnik**



▶ **Vodoodporna po IPX8**



▶ **Do 180 dni**



▶ **Brezžični polnilnik**



▶ **Originalne ščetine Dupont™**



▶ **5 načinov delovanja / 3 stopnje intenzivnosti**

### Nasveti:

#### Spomin načina ščetkanja

Ta izdelek ima funkcijo pomnilnika, ki samodejno preklopi na način, ki ste ga nazadnje uporabili.

Zobna ščetka ima funkcijo proti brizganju, ki po 5 sekundah aktivira polno moč.

#### Opomnik za nizko porabo energije

Pri delovanju z nizko napetostjo utripa peta lučka načina. Samodejno se izklopi, ko napetost pade pod določeno raven.

#### Opomnik za polno polnjenje

Ko se raven baterije povečuje, se število lučk načina povečuje.

Ko sveti vseh pet lučk načina, pomeni, da je naprava popolnoma napolnjena.

#### Opomnik za zamenjavo glave ščetke

Ko skupni čas ščetkanja doseže 360 minut, utripa rdeča lučka na glavi ščetke (samodejno se ustavi 10 sekund po izklopu zobne ščetke). Za

vklop naprave pritisnite in držite gumba za način in frekvenco 3 sekunde, da ponovno zaženete časovnik. Indikator pritiska

Ko močno pritisnete na zobe, se prižge indikator pritiska.

## POLNENJE NAPRAVE



**Opomba:** Pred prvo uporabo vklopite električno zobno ščetko. Če utripa peta lučka načina, to pomeni, da baterija ni dovolj napolnjena. Napolnite jo.

1. korak: Zobno ščetko postavite na brezžično polnilno postajo. Nato priključite USB priključek na 5V USB vrata.
2. korak: Med polnjenjem se bodo lučke načina zaporedoma prižigale, ko se bo raven baterije povečevala. Ko je polnjenje končano, se bo prižgalo vseh pet lučk načina. (Ko je baterija popolnoma napolnjena, sveti belo.)
3. korak: Popolno polnjenje traja približno 24–36 ur.
4. korak: Popolno polnjenje zadostuje za do 180 dni uporabe.

**Nasveti za polnjenje:**

Med polnjenjem je izdelek v načinu mirovanja in ga ni mogoče vklopiti.

Ne polnite zunaj ali v bližini vročih površin ali vlažnih okolij. Med polnjenjem hranite na suhem mestu.

## NAVODILA ZA VZDRŽEVANJE

**Čiščenje glave ščetke**



Po vsakem ščetkanju sperite, da odstranite ostanke, in pustite, da se posuši na zraku. Ne vlecite za ščetine, da preprečite deformacijo.

**Čiščenje ročaja**



Po vsakem ščetkanju odstranite ostanke in jih posušite z mehko krpo. Zobne ščetke ne potaplajte v vodo. Zobne ščetke ne čistite z vodo, vročo od 40 °C, ali z agresivnimi čistilnimi sredstvi.

**Zamenjava glave ščetke**



Zobozdravniki priporočajo, da glavo ščetke zamenjate vsake 3 mesece za optimalne rezultate čiščenja. Glavo ščetke zamenjajte, ko ščetine začnejo štrleti.

## REŠEVANJE TEŽAV

### Oslabljene vibracije

Problem	① Glava ščetke je pretesno pritrjena.
Rešitev	① Ponovno priključite glavo krtače na pogonsko gred in se prepričajte, da je med njima nekaj razmika.

### Morda bo delovalo le kratek čas

Problem	① Nepravilno polnjenje ② Prazna baterija.
Rešitev	① Prepričajte se, da je vaša zobna ščetka priključena na električno omrežje, indikatorska lučka mora utripati.

### Sploh ne deluje.

Problem	① Premajhen čas polnjenja. ② Zobna ščetka ni bila uporabljena več kot 6 mesecev.
Rešitev	① Polnite, dokler indikator ne preneha utripati.

## POZOR

1. Polnjenje v kopalnici ali postavitvev polnilnika nad ali blizu posode z vodo (kot je kad, bazen itd.).
2. Površine te naprave ne izpostavljajte določenim snovem (gel, olje, milo itd.) dlje časa, da preprečite korozijo.
3. Baterije ne poskušajte zamenjati sami.
4. Ne uporabljajte napajalnika/USB vhoda z izhodno napetostjo, višjo od 5 V, saj lahko to povzroči okvaro izdelka.

## POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA

Splošna opozorila  
1. Ta naprava ni namenjena uporabi osebam (vključno z otroki) z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi zmožnostmi.

2. Ta naprava je namenjena samo za osebno uporabo. Ni namenjena za mešano uporabo v zobozdravstvenih ordinacijah s strani več pacientov.
3. Ta izdelek lahko uporablja samo navedeno glavo zobne ščetke in deluje samo z navedenim polnilnim kablom USB.
4. Indikator polnjenja morda ne bo deloval takoj, če naprave dlje časa niste uporabljali. Za obnovitev stanja je potrebnih 6–10 minut.
5. Med polnjenjem je normalno, da na ročaju čutite rahlo toploto. Če pa se preveč segreje, izključite napajalni kabel.
6. Zobne ščetke ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi. Hranite jo na suhem in prezračevanem mestu pri temperaturi med  $-7^{\circ}\text{C}$  in  $40^{\circ}\text{C}$ .
7. Pravilno odstranjevanje naprave in vgrajene baterije mora biti v skladu z lokalnimi predpisi.

## **Medicinska opozorila**

1. Za uporabnike, ki izdelek uporabljajo prvič, je normalno, da v prvem tednu uporabe občutijo rahlo krvavitev in nelagodje. Če krvavitev ali nelagodje ne preneha po enem tednu uporabe, prenehajte z uporabo in se posvetujte z zobozdravnikom.
2. Če ste v zadnjih dveh mesecih imeli operacijo v ustih ali dlesnih ali če imate zobno protezo, se pred uporabo posvetujte z zobozdravnikom.

## **IZKLJUČITEV GARANCIJE**

1. Zobne ščetke ne razstavljajte, sicer Lovio ne prevzema nobene odgovornosti.
2. Za polnjenje te zobne ščetke uporabljajte samo 5V USB polnilnik, sicer Lovio ne prevzema nobene odgovornosti.

V primeru okvarjenega izdelka nas prosimo kontaktirajte.